

## Provtagning för blod i avföring, F-Hb specifikt

### INFORMATION

Provtagningen utförs för att undersöka om det finns spår av blod i avföringen. Oftast tas tre prover från tre olika dagar men ibland ordinerar färre prover.

### FÖRBEREDELSE

Provtagning ska **inte** utföras i samband med:

- Pågående menstruation
- Blödande hemorrojder
- Blod i urinen


### PROVTAGNINGSMATERIAL

- Namnetiketter
- En separat provtagningsburk för avföringsprov för varje prov

### UTFÖRANDE


Märk provtagningsburkarna med personnummer, namn och provtagningsdatum. Använd medföljande namnetikett om sådan finns medskickad.

1. Lämna en del av avföringen på ett toalettpapper eller i ett rent engångskärl.
2. Öppna provtagningsburken, som innehåller vätska. Ta avföringsprov med provtagningspinnen som sitter i locket. Stick ned och rotera pinnen på olika ställen i avföringen tills ändens båda fåror är fyllda. **Stick ej ner pinnen där eventuellt blod är synligt.** Avlägsna överskott genom att försiktigt torka av pinnen med toalettpapper. Se bild 1.

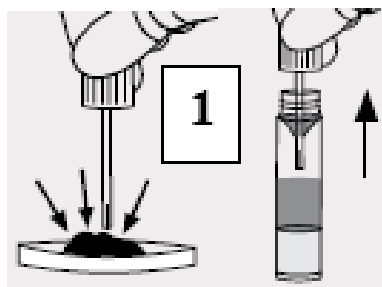


## Provtagning för blod i avföring, F-Hb specifikt

3. Rätt mängd avföringsprov är den som ryms i de båda fårorna i pinnens ände. Skruva på locket så att det sluter tätt. Se bild 2.

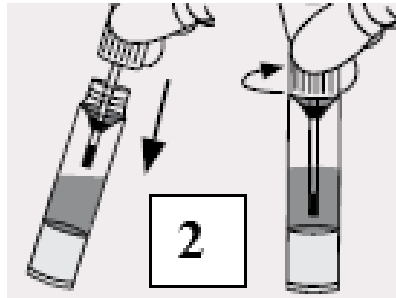

4. Skaka burken tills avföringen har lösts upp i vätskan.

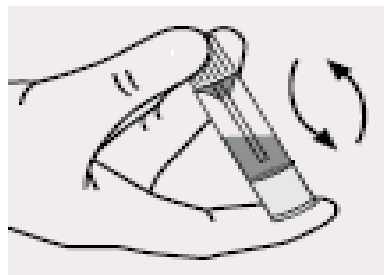

Ange korrekt provtagningstid (datum och klockslag) på burken.

5. Dag 2 gör likadant med den andra burken och dag 3 den tredje burken.
6. Lämna in proverna på din vårdenheter eller en vårdcentralers laboratorium så snart som möjligt, senast inom 6 dagar efter den första provtagningen. Provtagningsburkar med avföring förvaras i kylskåp (rekommenderas) eller i rumstemperatur.

**OBS!** Vätskan i provtagningsburken får inte förtäras, inte hällas ut och inte heller spädas om den spillts ut. Hämta ny provtagningsburk om det blir fel.

### KONTAKTUPPGIFTER

Har du några frågor i samband med provtagningen så ska du kontakta din vårdgivare, den som har ordinerat proverna.